




REMODELING: **Neuroform3 + Coil Target NANO**

Aneurisma ACoA residual post-clipping

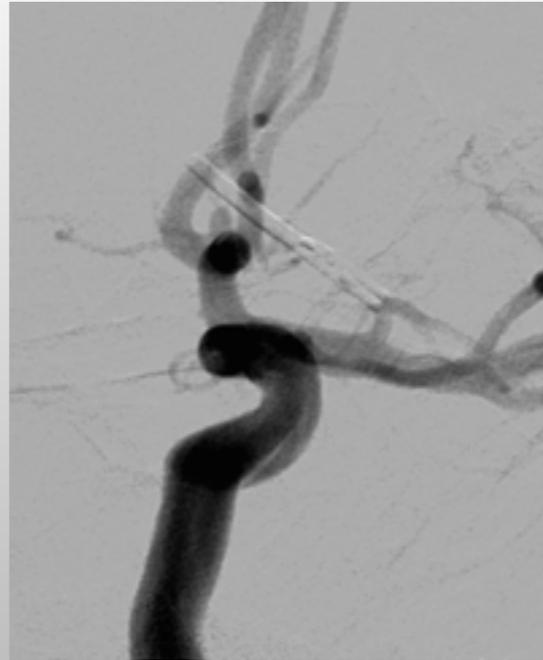


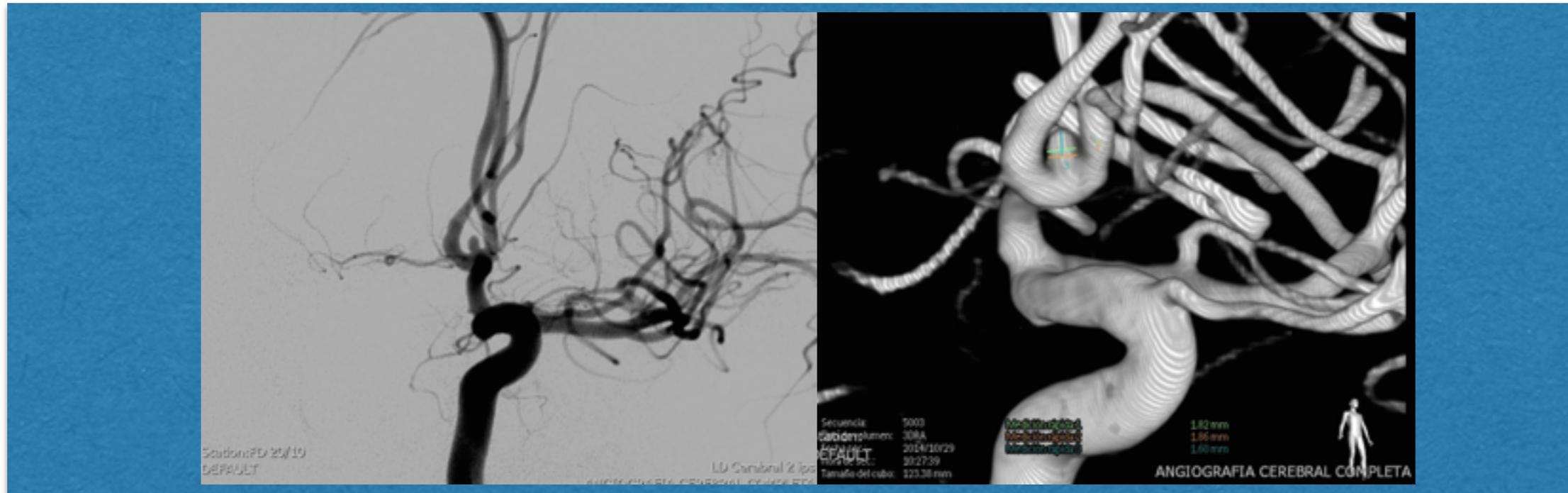


Varón de 32 años, con HSA difusa secundaria a rotura de aneurisma de ACoA, en octubre 2014. Tratado mediante cirugía abierta y clipaje del aneurisma. Control en febrero 2015 muestra aneurisma abierto (clip colocado probablemente en el pseudoaneurisma).

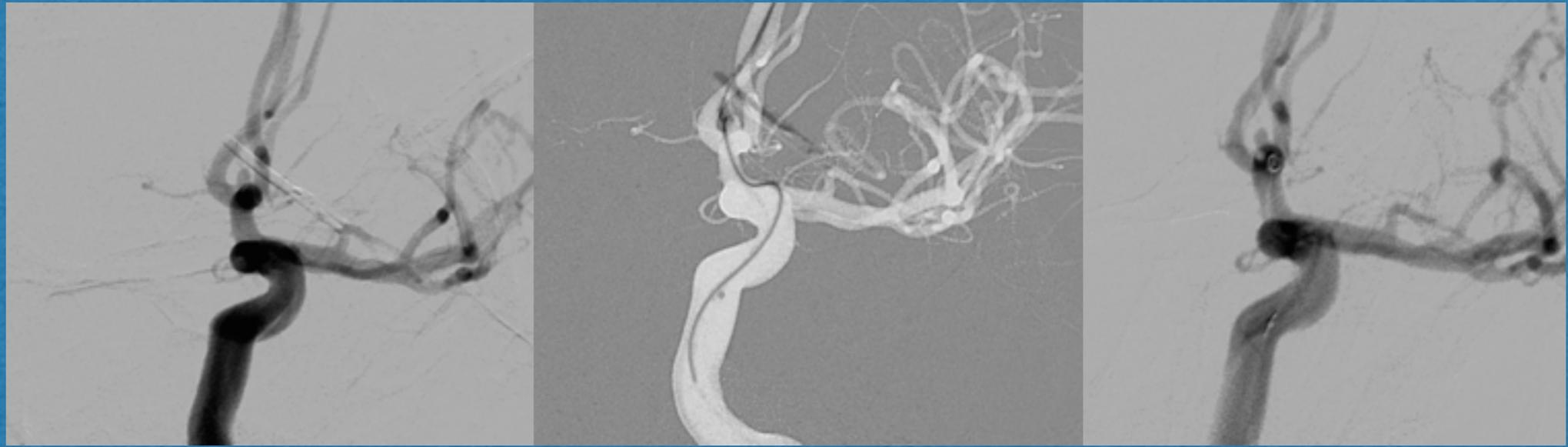


Remodeling con balón no fue posible, el coil no se quedaba en el saco aneurismático. Se decide realizar remodeling con stent de celda abierta.

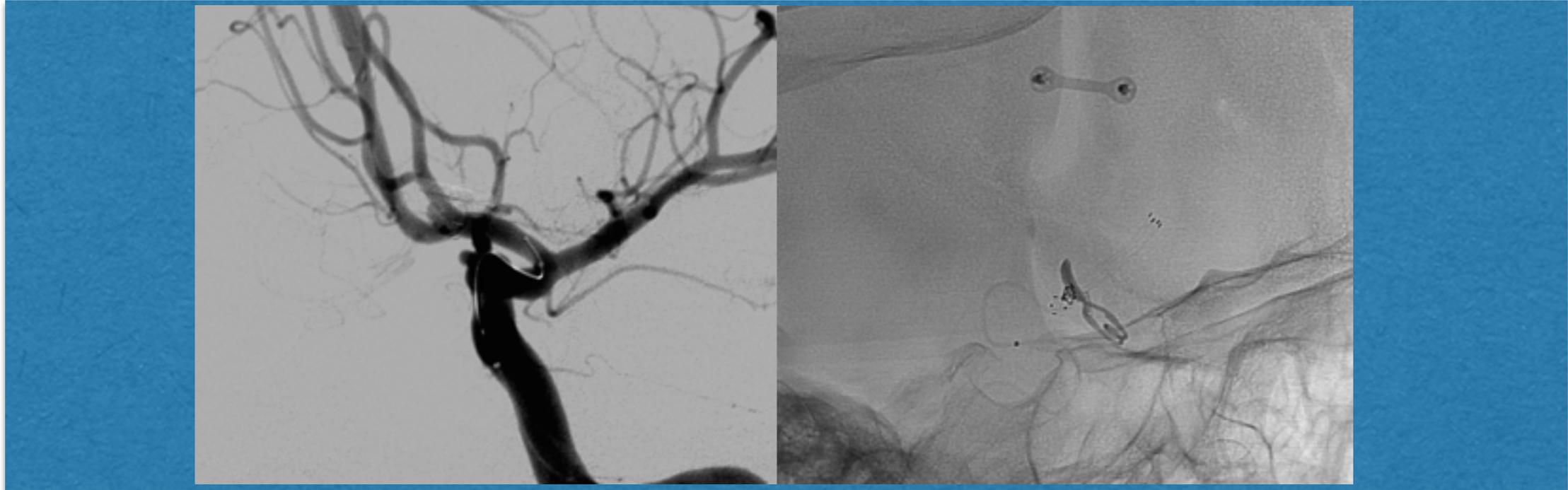

Stent Neuroform3 2,5 x 20
Coil Target NANO 2,5 x 4

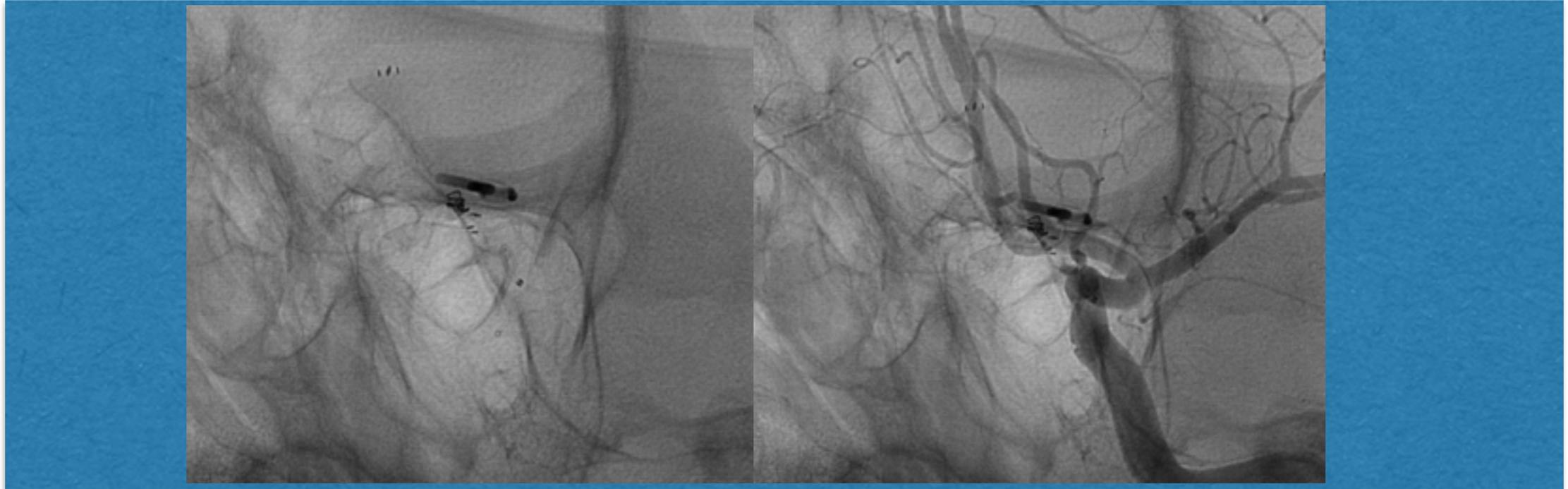

Control final post-embolización

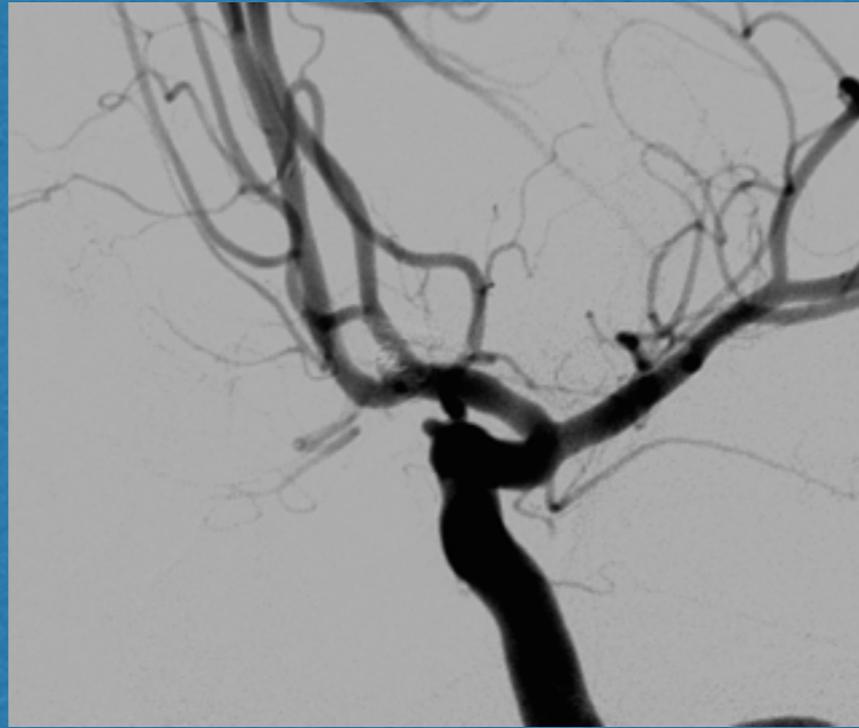

Control a los 12 meses (febrero /2016)
Oclusión completa sin signos de recanalización.
Stent permeable sin signos de estenosis.

COMENTARIO

En este caso no se realizó “Jailing-technique (fig A)” para el remodeling, realizamos la técnica “Coil-Through (fig B)” abocando mínimamente el extremo distal del microcatéter SL10, a travez de las celdas abiertas del extremo proximal del stent Neuroform3.

Como se puede ver en las fotos del caso, el stent cubre completamente el cuello con su extremo proximal, segmento donde mas abiertas están las celdas, lo que permitió una fácil aproximación del microcatéter SL10 al saco aneurimático, y un sencillo, controlado y optimo empaquetamiento con coil Target Nano.

